

# beurer MG 100

CZ



**CZ** **Infračervený masážní přístroj pro poklepovou masáž**  
**Návod k použití**

## Rozsah dodávky

- Infračervený masážní přístroj pro poklepovou masáž
- 2 vyměnitelné masážní nástavce
- tento návod k použití

## Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:



**VAROVÁNÍ** Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.



**POZOR** Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.



**Upozornění** Upozornění na důležité informace.



Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak bezpečnostní třídě 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorách.

## 1. Seznámení

### Funkce přístroje

Pomocí tohoto elektrického infračerveného masážního přístroje můžete sobě nebo jiným osobám dopřát účinnou a blahodárnou masáž bez cizí pomoci. Masáže mohou působit relaxačně a povzbudivě a jsou oblíbené při léčbě natažených svalů, bolestí a únavy. Přístroj umožňuje silnou, intenzivní masáž zad. Přístroj je určen pouze k soukromému používání, ne pro lékařské nebo komerční používání.

## 2. Použití k určenému účelu

Tento přístroj je určen k masáži jednotlivých částí lidského těla. Nemůže nahradit lékařské ošetření. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud se Vás týká jeden nebo více z následujících výstražných upozornění. Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás masážní přístroj vhodný, dotážete se svého lékaře.



### VAROVÁNÍ

Masážní přístroj nepoužívejte

- u dětí,
- u zvířat,
- při výhřezu meziobratlové ploténky nebo patologických změnách páteře,
- v žádném případě pro masáže v oblasti srdce, jestliže máte kardiostimulátor, a dotážete se nejprve svého lékaře i ohledně ostatních částí těla,
- nikdy na oteklých, popálených, zanícených nebo poraněných částech kůže a těla,
- během těhotenství,
- v obličejí (oči), na hrtanu nebo jiných obzvláště citlivých částech těla,
- nikdy během spánku,
- po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!).

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými psychickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely informace, jak mají přístroj správně používat.

Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

Před použitím masážního přístroje se dotážete svého lékaře

- pokud trpíte těžkou nemocí nebo jste po operaci,

- při horečnatých nachlazeních, křečových žilách, trombózách, zánětu žil, žloutence, cukrovce, one-mocnění nervů (např. ischias) nebo akutních zánětech.

Přístroj je určen pouze k účelu popsanému v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

### 3. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.



#### **VAROVÁNÍ**

Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

#### **Elektrický proud**



#### **VAROVÁNÍ**

Jako každý elektrický přístroj, také tento masážní přístroj používejte opatrně a uvážlivě, aby se zabránilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Přístroj proto

- připojujte pouze k napětí, které je uvedeno na přístroji,
- nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
- nepoužívejte při bouřce.

V případě závady nebo poruchy provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytažování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem.

Přístroj za žádných okolností neotevírejte.

Jestliže je poškozen síťový kabel přístroje, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu. Ujistěte se, že masážní přístroj, zástrčka a kabel nemohou přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami.

Přístroj proto

- používejte pouze v suchých vnitřních místnostech,
- používejte pouze suchýma rukama,
- nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo u plného umyvadla,
- nepoužívejte v bazénu, vířivce nebo sauně,
- nepoužívejte venku.

Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.

#### **Oprava**



#### **VAROVÁNÍ**

Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

#### **Nebezpečí požáru**



#### **VAROVÁNÍ**

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Proto přístroj

- nepoužívejte déle než 15 minut (nebezpečí přehřátí) a před dalším použitím jej nechte minimálně 15 minut vychladnout,
- neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,

- nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...

## Manipulace



### POZOR

Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Dbejte na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
- Dbejte na to, aby se do přístroje nezapletly žádné vlasy.
- Zamezte kontaktu se špičatými nebo ostrými předměty.
- Nepřehýbejte přístroj ani kabel.
- Chraňte přístroj od tepelných zdrojů v blízkosti, např. od kamen, topných těles nebo přímého slunečního záření.

## Likvidace




### POZOR

Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.



## 4. Popis přístroje

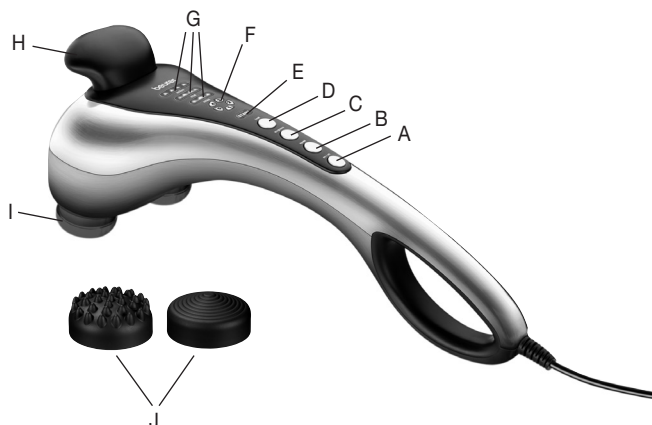

- A Vypínač
- B Rychlost  
Nastavení rychlosti masáže
- C Programy  
Výběr různých masážních programů
- D Zahřívání  
Infračervené záření
- E Spuštění  
Spuštění programu
- F Zobrazení rychlosti masáže
- G Masážní program
- H Přídavné držadlo
- I Masážní plocha s infračerveným ohřevem
- J Vyměnitelné masážní nástavce

## 5. Uvedení do provozu

- Odstraňte obal a ochranné fólie přístroje .
- Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
- Připojte přístroj k síti. Přístroj přitom musí být vypnutý.
- Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.

## 6. Obsluha

Před zapojením kabelu do sítě se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Přístroj zapněte vypínačem. Spustí se masážní program.

Stisknutím tlačítka rychlosti (speed) můžete v případě potřeby rychlost masáže zvýšit nebo snížit, a to vždy o jeden stupeň.

Stisknutím tlačítka programů můžete vybrat jeden ze tří různých masážních programů (s automaticky nastavovaných stupněm rychlosti).

- **Relax:** Plynulá a uklidňující masáž.
- **Vital:** Intenzivní a pulzující masáž.
- **Active:** Hluboková a pulzující masáž.

Infračervený ohřev se zapíná stisknutím tlačítka zahřívání a může se používat při všech masážních programech.

Přiložte přístroj jednou nebo oběma rukama k části těla, kterou chcete masírovat. Můžete stát, sedět, nebo ležet a masírovat sebe či jinou osobu. Silným nebo slabším stisknutím masážního přístroje můžete měnit intenzitu masírování. Nemasírujte jedno místo na těle déle než 3 minuty a potom přejděte na jinou partii.

Po maximálně 15 minutách používání znovu přístroj vypněte a nechte ho vychladnout. Skladujte přístroj v suchu.

### Upozornění

- Masážní přístroj nepoužívejte krátce před ulehnutím. Masáž může mít i stimulační účinek a způsobit poruchy při usínání.
- Masážní přístroj má zabudovanou ochranu proti přehřátí, díky níž se přístroj v případě přehřátí automaticky vypne. V tomto případě nechte přístroj 30 minut zchladit, než ho opět začnete používat.

### VAROVÁNÍ

- Masáž musí být vždy vnímána jako příjemná a uvolňující. Pociťujete-li masáž jako bolestivou nebo nepříjemnou, přerušete ji či změňte polohu masážního přístroje.
- Nestrkejte ani netlačte žádnou část svého těla, zejména ne prsty, do oblasti masážní hlavy.

## 7. Péče a skladování

### Čištění

Při čištění musí být přístroj odpojený od sítě a vychladlý, otírejte ho pouze lehce navlhlčenou utěrkou z mikrovlákna. Můžete k tomu použít slabý čisticí prostředek.

### VAROVÁNÍ

- Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Přístroj čistěte pouze popsaným způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v žádném případě vniknout kapalina.
- Přístroj znovu použijte teprve tehdy, až bude zcela suchý.

## Skladování

Přístroj skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném místě. Doporučujeme skladování v originálním obalu.

## 8. Jak si poradit s problémy?

Problém	Příčina	Řešení
<b>Masážní hlava se nepohybuje.</b>	Přístroj není připojen k elektrické síti.	Zasuňte síťovou zástrčku do.
	Přístroj není zapnutý.	Zapněte přístroj.
	Byla spuštěna ochrana proti přehřátí.	Odpojte přístroj od sítě, vyčkejte nejméně 15 minut, opět připojte a zapněte.

## 9. Technické údaje

Rozměry (š/v/h) ~ 160/150/450 mm

Hmotnost ~ 1740 g

Jmenovitý výkon 25 W

Jmenovité napětí 220-240 V ~ 50 Hz



